


ALPHATM ARCH

UNIENDO ESTABILIDAD, ESTÉTICA Y CONFIANZA

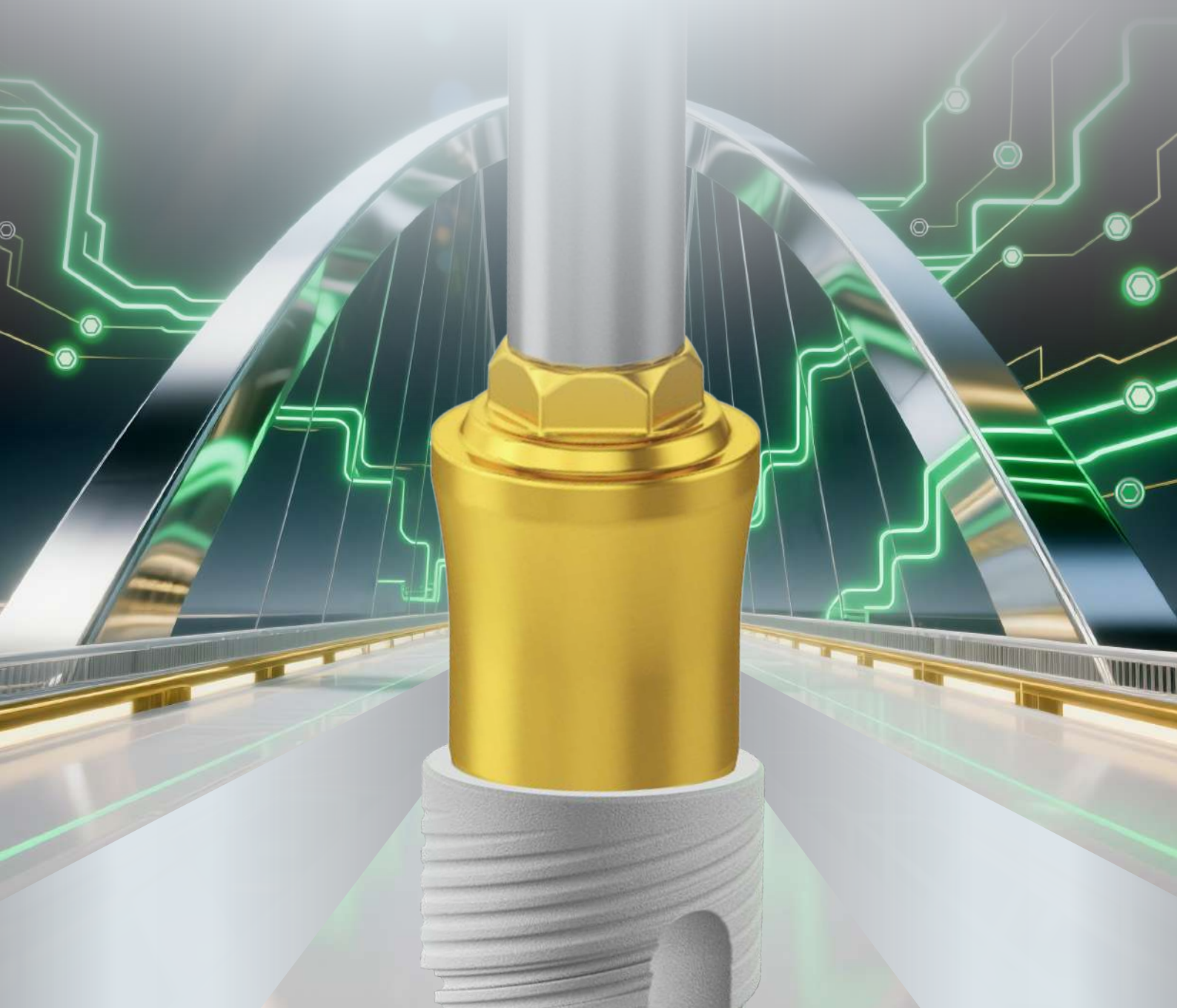

EL SIGUIENTE NIVEL
EN PRECISIÓN Y FIABILIDAD

 AlphaBio^{TEC}
Iberia

ALPHATM  ARCH

UNIENDO ESTABILIDAD,
ESTÉTICA Y CONFIANZA





Alpha™ Arch es una solución integral para restauraciones de arcadas completas y parciales que potencia la estabilidad, la estética y la confianza clínica. Representa una filosofía clínica que integra la biomecánica, la excelencia estética, la eficiencia del flujo de trabajo y la previsibilidad a largo plazo.

Diseñado para cumplir los más altos estándares de la implantología moderna, Alpha Arch mejora la estética, la durabilidad, la facilidad de uso y la gestión de los tejidos blandos. Gracias a su precisión y ajuste seguro, permite a los clínicos alcanzar resultados estéticos excepcionales, predecibles y duraderos, ¡creando sonrisas con confianza!

BENEFICIOS CLÍNICOS



Flexibilidad y
versatilidad protésica



Estética predecible
y mejorada



Flujo de trabajo
simplificado y eficiente



Mayor estabilidad
de los tejidos

ELEVANDO

EL RENDIMIENTO

INSPIRADO POR EL
POTENCIAL
HUMANO





INDICACIONES CLÍNICAS

Puentes implantosoportados totales y parciales

MANEJO MEJORADO Y FÁCIL INTEGRACIÓN EN EL FLUJO DE TRABAJO

MANEJO OPTIMIZADO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

AMPLIA GAMA DE ALTURAS GINGIVALES OPCIONES PARA PERSONALIZACIÓN

FLEXIBILIDAD QUIRÚRGICA Y PRESERVACIÓN ÓSEA



COMPATIBILIDAD CON PRÓTESIS MULTI-UNIT DE NOBEL BIO CARE (PARA COMPONENTES DEL SISTEMA DE 4.8 MM)

MEJORA BIOMECÁNICA Y ESTABILIDAD A LARGO PLAZO

PRECISIÓN Y ESTÉTICA PROTÉSICA




ÁNGULO DE DIVERGENCIA ALPHA ARCH





CONEXIONES DISPONIBLES PILAR-IMPLANTE

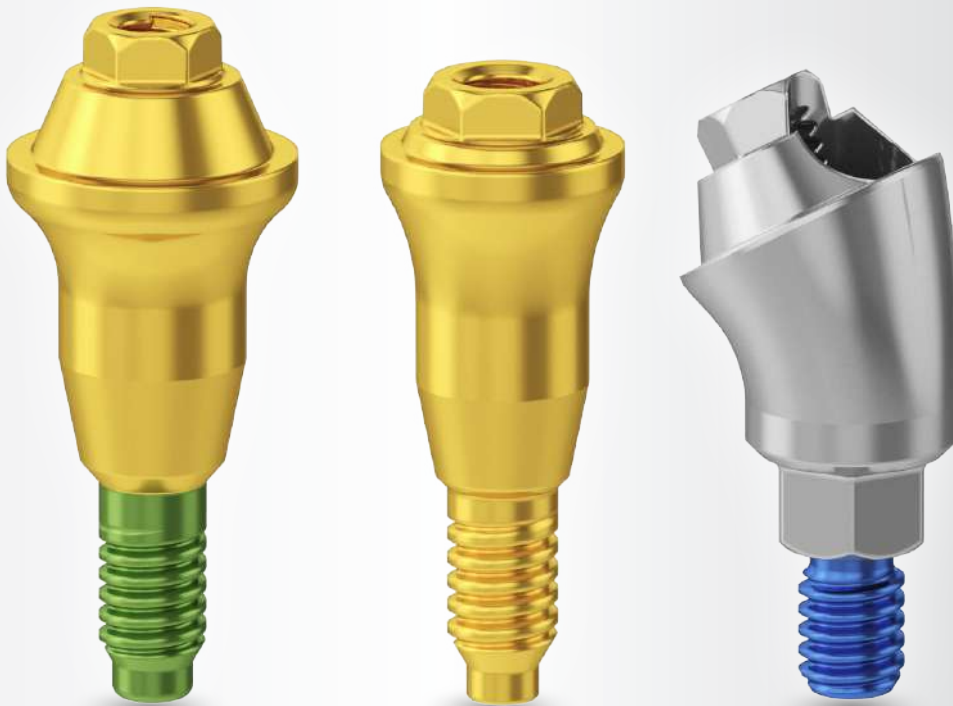

TORNILLOS CODIFICADOS POR COLOR PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN

CS - Tornillo anodizado en verde **CHC** - Tornillo anodizado en dorado **IH** - Tornillo anodizado en azul

PERFIL DE EMERGENCIA CÓNCAVO ESTRECHO

- Mejora la gestión de tejidos blandos y la estética
- Permite la colocación subcrestal

COMPATIBILIDAD PROTÉSICA

- Mismos componentes protésicos en todas las conexiones implante-pilar

CUERPO ANODIZADO EN DORADO

- Mejora la estética y proporciona un aspecto más natural

- Pilar estándar Ø4.8 mm, compatible con componentes protésicos Multi-Unit de uso común

DIÁMETROS DISPONIBLES

- **¡NUEVO!** Pilar estrecho Ø3.5 mm, adecuado para espacios limitados y zonas restauradoras estrechas

- Pilar estándar Ø4.8 mm, compatible con componentes protésicos Multi-Unit de uso común

- Alturas disponibles: 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm
- Opciones de tratamiento versátiles

AMPLIA GAMA DE ALTURAS GINGIVALES

- Alturas disponibles: 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 4.5 mm & 5.5 mm
- Opciones de tratamiento versátiles



NUEVO MANGO

- Para facilitar el uso



PILARES RECTOS MULTI-UNIT ESTÁNDAR Ø 4.8 mm

30
Ncm



**Conexión Cónica
Estándar (CS)**

Ø 4.8



5701

Ø 4.8



5702

Ø 4.8




5703

Ø 4.8



5704

Ø 4.8

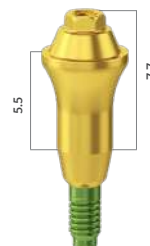

5705

30
Ncm



**Conexión Cónica
Estrecha (CHC)**

Ø 4.8



5721

Ø 4.8



5722

Ø 4.8



5723

Ø 4.8



5724

Ø 4.8



5725

30
Ncm



**Conexión
Hexagonal
Interna (IH)**

Ø 4.8



5711

Ø 4.8



5712

Ø 4.8



5713

Ø 4.8



5714

Ø 4.8




5715

Destornilladores Multi-Unit y Tornillos protésicos


* Los drivers y tornillos protésicos son aptos tanto para sistemas Multi-Unit estándar (Ø4.8 mm) como estrechos (Ø3.5 mm).

DESTORNILLADOR
RECTO

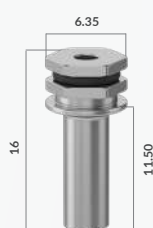

5600

DESTORNILLADOR DE
RECUPERACIÓN

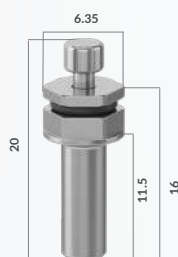

5700

TORNILLO
PROTÉSICO






5610

TORNILLO
DINÁMICO



5609

PILARES ANGULADOS MULTI-UNIT ESTÁNDAR Ø 4.8 mm

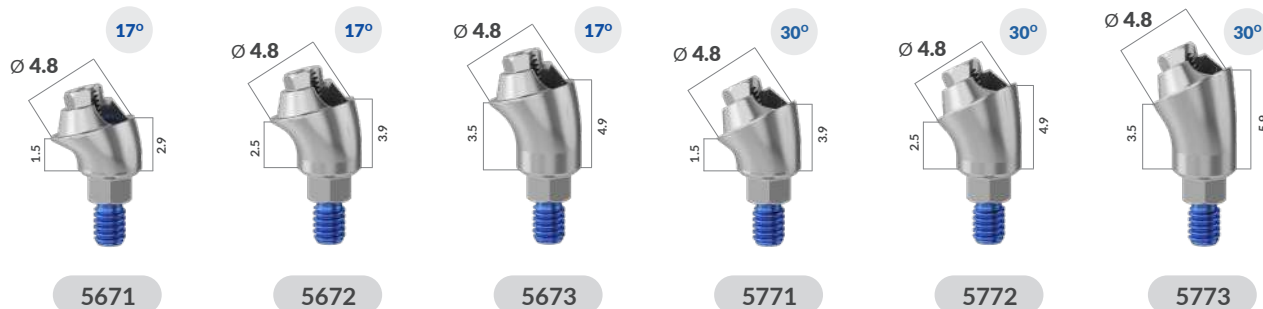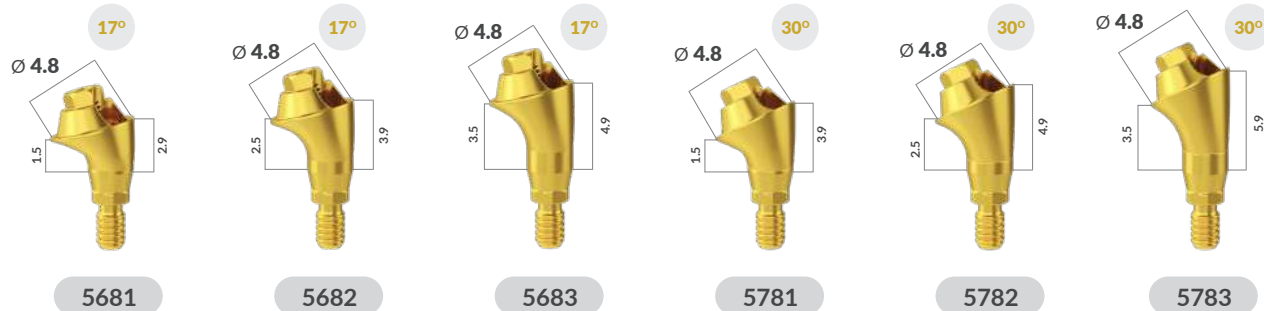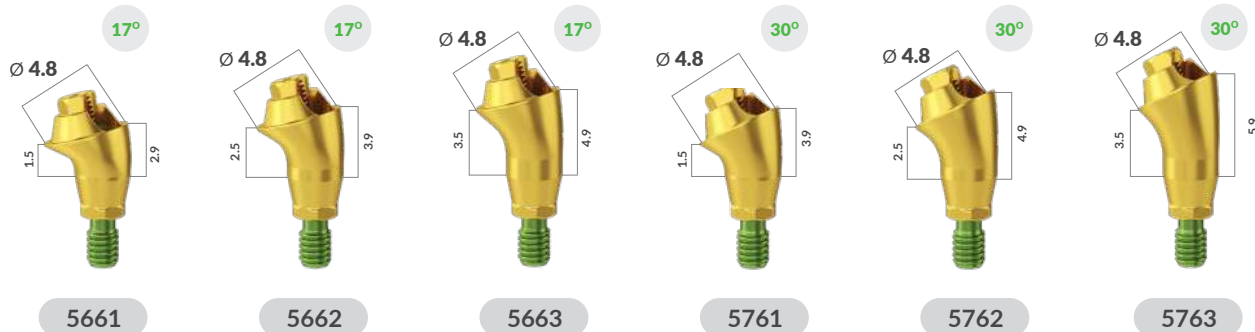

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material: Titanio | **Destornilladores - Sandvik**

Destornilladores necesarios:

- Para los pilares Multi-Unit rectos, utilice el destornillador recto (Ref. 5600) y los destornilladores de recuperación (Ref. 5700).
- Para los pilares Multi-Unit angulados, utilice los destornilladores protésicos de 1,25 mm

- Todos los pilares Multi-Unit de Ø4.8 mm son compatibles con las prótesis Multi-Unit de Nobel Biocare.

Fuerza de torque recomendada:

- Pilares Multi-Unit Rectos - 30 Ncm
- Pilares Multi-Unit Angulados CS & IH - 30 Ncm
- Pilares Multi-Unit Angulados CHC - 20 Ncm

COMPONENTES PROTÉSICOS MULTI-UNIT Ø 4.8 mm

TAPONES DE CICATRIZACIÓN

Ø 5.1



5741

TORQUE
MANUAL
10 Ncm

Ø 5.1



5742

PILAR TEMPORAL



5748

Ø 4.8

20
Ncm

PILAR CALCINABLE



5749

Ø 4.8

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

Ø 5.5



5743

TORQUE
MANUAL
10 Ncm

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

Ø 4.8



5747

SCAN BODY TRZ

Ø 6



5740

TORQUE
MANUAL
10 Ncm

ANÁLOGO

Ø 4.8



5744

ANÁLOGO DIGITAL

Ø 4.8



5750

COPING ADHESIVO

Ø 5.1



5746

20
Ncm

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Material: Titanium | Destornilladores - Sandvik | Scan Body TRZ - PEEK

Fuerza de torque recomendada:

- Pilares Multi Unit rectos - 30 Ncm
- Tapones de cicatrización, Transfers de cubeta abierta y cerrada y Scan Body - 10 Ncm o torque manual
- Pilar temporal - 20 Ncm

Destornilladores necesarios:

- Destornillador recto (Ref. # 5600) y destornillador de recuperación (Ref.# 5700)

ALPHA ARCH

SUPERANDO **LOS LÍMITES** DE LA CAPACIDAD HUMANA



ESCANEA EL CÓDIGO QR:

DESCARGA LA GUÍA PASO A PASO
DE ALPHA ARCH



PILARES RECTOS MULTI-UNIT ESTRECHOS Ø 3.5 mm

30
Ncm



**Conexión Cónica
Estándar (CS)**

Ø 3.5



5601

Ø 3.5



5602

Ø 3.5



5603

Ø 3.5



5604

Ø 3.5



5605

30
Ncm



**Conexión Cónica
Estrecha (CHC)**

Ø 3.5



5621

Ø 3.5



5622

Ø 3.5



5623

Ø 3.5



5624

Ø 3.5



5625

30
Ncm




**Conexión
Hexagonal
Interna (IH)**

Ø 3.5




5611

Ø 3.5

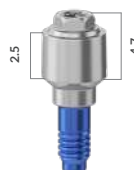


5612

Ø 3.5

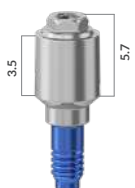


5613

Ø 3.5

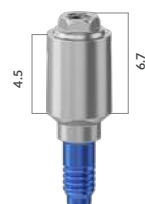

5614

Ø 3.5

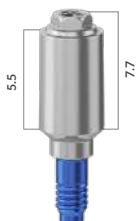


5615

Destornilladores Multi-Unit y Tornillos protésicos


* Los drivers y tornillos protésicos son aptos tanto para sistemas Multi-Unit estándar (Ø4.8 mm) como estrechos (Ø3.5 mm).

DESTORNILLADOR
RECTO

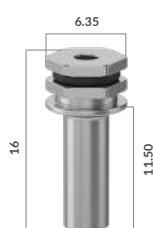


5600

DESTORNILLADOR DE
RECUPERACIÓN

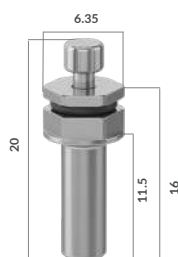

5700

TORNILLO
PROTÉSICO

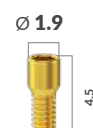

5610

TORNILLO
DINÁMICO



5609

COMPONENTES PROTÉSICOS MULTI-UNIT Ø 3.5 mm

TAPÓN DE CICATRIZACIÓN

Ø 3.9



5641

TORQUE
MANUAL
10 Ncm

Ø 3.9



5642

PILAR TEMPORAL



5648

Ø 3.5

20
Ncm

PILAR CALCINABLE



5649

Ø 3.5

TRANSFER DE CUBETA ABIERTA

Ø 5.2



5643

TORQUE
MANUAL
10 Ncm

TRANSFER DE CUBETA CERRADA

Ø 3.5



5647

SCAN BODY TRZ

Ø 6



5640

TORQUE
MANUAL
10 Ncm

ANÁLOGO



5644

Ø 3.5

13

ANÁLOGO DIGITAL



5650

Ø 3.5

13

COPING ADHESIVO

Ø 3.9



5646

20
Ncm

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Material: Titanium | **Destornilladores** - Sandvik | **Scan Body TRZ** - PEEK


Fuerza de torque recomendada:

- Pilares Multi Unit rectos - 30 Ncm
- Tapones de cicatrización, Transfers de cubeta abierta y cerrada y Scan Body - 10 Ncm o torque manual
- Pilar temporal - 20 Ncm


Destornilladores necesarios:

- Destornillador recto (Ref. # 5600) y destornillador de recuperación (Ref.# 5700)

FLUJO DE TRABAJO ALPHA ARCH

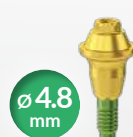 **Ø4.8 mm**

Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CS	5701	5702	5703	5704	5705
CHC	5721	5722	5723	5724	5725
IH	5711	5712	5713	5714	5715

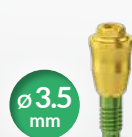 **Ø3.5 mm**


Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CS	5601	5602	5603	5604	5605
CHC	5621	5622	5623	5624	5625
IH	5611	5612	5613	5614	5615

 **17°**
Ø4.8 mm

Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CS	5661	5662	5663
CHC	5681	5682	5683
IH	5671	5672	5673

 **30°**
Ø4.8 mm

Altura Gingival	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CS	5761	5762	5763
CHC	5781	5782	5783
IH	5771	5772	5773

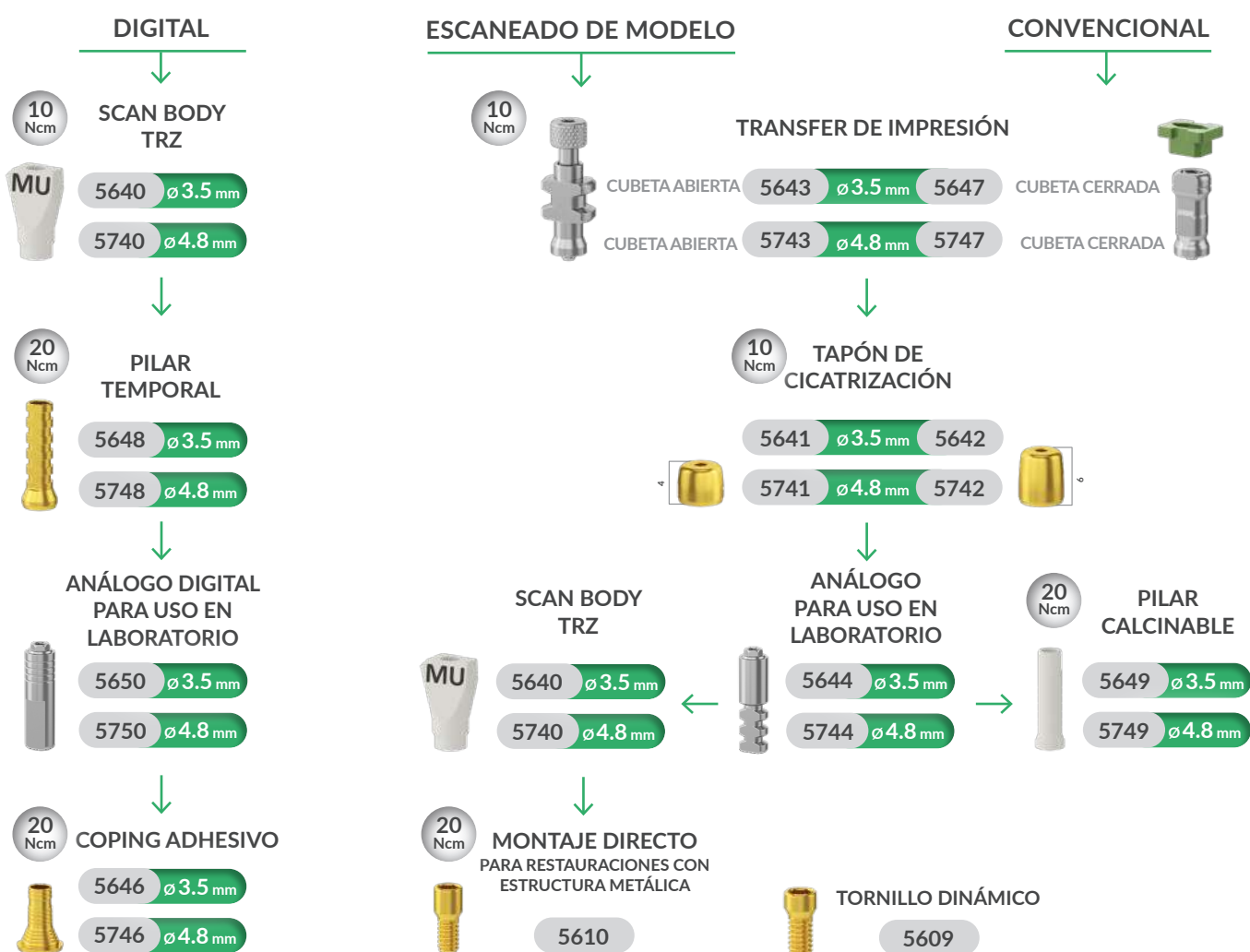

DESTORNILLADORES Y ACCESORIOS



ALPHA  ARCH

DANDO FORMA AL FUTURO
DE LA **EXCELENCIA RESTAURADORA**
ONE ARCH AT A TIME



ALPHATM ARCH

UNIENDO ESTABILIDAD, ESTÉTICA Y CONFIANZA



995-9563 R1 9.2025



ESCANEA LOS CÓDIGOS QR PARA:



GUÍA PASO A PASO
ALPHA ARCH



FAQS ALPHA ARCH



LIBRERÍA DIGITAL
PARA SISTEMA CAD/CAM



Los productos de Alpha-Bio Tec cuentan con el marcado CE conforme al Reglamento (UE) sobre productos sanitarios MDR 2017/745, de 5 de abril de 2017. Alpha-Bio Tec cumple con la norma EN ISO 13485:2016. La disponibilidad de los productos puede variar según el país. Los componentes de la solución Alpha Arch están destinados exclusivamente a profesionales dentales cualificados. Utilizar según las indicaciones del e-IFU. Se recomienda aplicar criterio profesional.

alphabio-iberia.com